



Brugsanvisning den justerbare krank til cykelergometre og ergometre til overkropsergometre



1 Generelt




Læs denne brugsanvisning med alle sikkerhedsinstruktioner og advarsler omhyggeligt **før første brug** for at sikre sikker og korrekt brug. Opbevar dette dokument til fremtidig brug og giv det til andre, hvis du giver apparatet videre.

2 Oversigt

- Cyklus: Radius justerbar mellem 75 mm og 175 mm
- Varenummer: Z-EF-AL-011/ Z-MED-AL-011 (medicinsk version)
- Armaturhus: Radius kan justeres mellem 75 mm og 225 mm, mulighed for at skifte fra asynkron til synkron position af håndtagene
- Fremstillet udelukkende af rust- og syrebestandigt rustfrit stål
- Sikker og nem justering - uden værktøj
- Ekstremt robust design

längenverstellbares Kurbelset Z-MED-AL-011

adjustable crank arm set

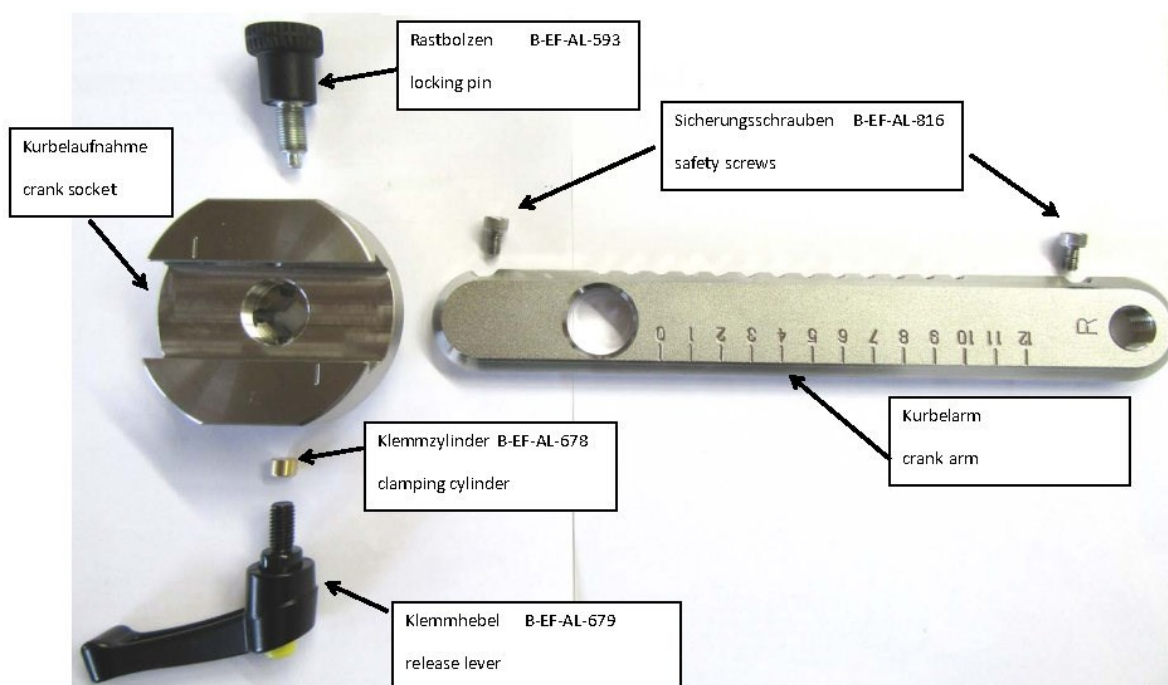

Komponenten ohne Artikelnummer können nicht separat gekauft werden, sondern gehören zu einem kompletten Kurbelset

Parts without article number are not sold separately. They are only available as part of a set of adjustable crank arms

3 Pleje og vedligeholdelse

Opmærksomhed: Tilspænd krumtapakkerne og pedalerne igen

Efter de første 10 timers brug skal krumtapakkerne og pedalerne strammes. Hvis pedalerne og krumtagene ikke er spændt til, kan der opstå skader på akslen, krumtagene eller pedalerne, og i så fald er der ikke længere nogen garanti.

4 Monteringsvejledning

4.1 Der kræves værktøj til montering:

- Skruetrækker med slids lille
- Åben skrueøgle SW 15 / 17 / 19
- Sekskantet stik SW 14
- Krumtapaksler
- Drejningsnøgle indstillet til 60Nm

4.2 Trin 1 - Afmontering af pedalerne

Fjern pedalerne i venstre og højre side ved hjælp af skrueøglen SW15. **Opmærksomhed:** På venstre side åbner skrueforbindelsen i UZS, på højre side mod UZS.

4.3 Trin2 - Løsning af skrueforbindelsen af krumtapakslen til akslen

Fjern den lille sorte plastikkappe til højre og venstre, der dækker skrueforbindelsen til krumtappen, ved hjælp af den lille spids skruetrækker. Løsn nu skrueforbindelserne på begge sider ved hjælp af momentnøglen og sekskantnøglen SW 14.

4.4 Trin 3 - Trækning af krumtappen fra akslen

Skrue udtrækkerens skrue med hånden ind i gevindet på akselmonteringen. Drej 17skruen på aftrækkerens skrue i UZS med svensknøglen SW, indtil krumtappen er løsnet, og krumtappen kan nu let fjernes. Fjern aftrækkeren fra krumtappen med den åbne skrueøgle SW19, og bring den tilbage i den oprindelige position ved at dreje den mod UZS. Fortsæt på samme måde med krumtappen på den anden side.

4.5 Trin 4 - Montering af de justerbare krankpedaler



Fjern de sorte dæksler fra åbningerne på de to krumtapaksler. Hvis krumtapakkerne endnu ikke er indstillet til pos. o, skal du bringe dem til den nødvendige pos. o til montering ved at åbne spændingshåndtaget og trække i udløserknappen. Krumtapakkerne er markeret med et L for venstre side og med et R for højre side, sørg for, at de er i den korrekte position, da pedalerne ellers kan løsne sig. Placer krumtappen med L'et i venstre side på akslens firkant. Skru nu den bolt, du fjernede tidligere, tilbage i akslen med momentnøglen, og stram den til 60 Nm. Gør det samme på den anden side.

4.6 Trin 5 - Montering af pedalerne

Pedalerne er også mærket med L for venstre og R for højre. Ved monteringen skal du sikre dig, at venstre side er skruet ind mod UZS og højre side ind i UZS, og at venstre side er skruet ind i UZS. Spænd pedalerne meget fast, da de ellers kan løsne sig.

5 Anvendelse af V-kurven

Som kort⁴ angivet i trin kan V-krumtappen justeres i længden ved at løsne spændingshåndtaget (A) og trække i låsebolten (B). Kurvens position kan aflæses på skalaen på siden. Efter justering af krumtappen er det vigtigt at sikre, at låseskruen (B) er i indgreb, og at spændehåndtaget (A) er låst og justeret i forhold til krumtappen (se billede). For at opnå en justeret position for klemgrebet kan det løftes lidt i den låste position og bringes i den ønskede position. Hvis du ikke gør det, kan det medføre personskaade eller skade på kurven og maskinen.

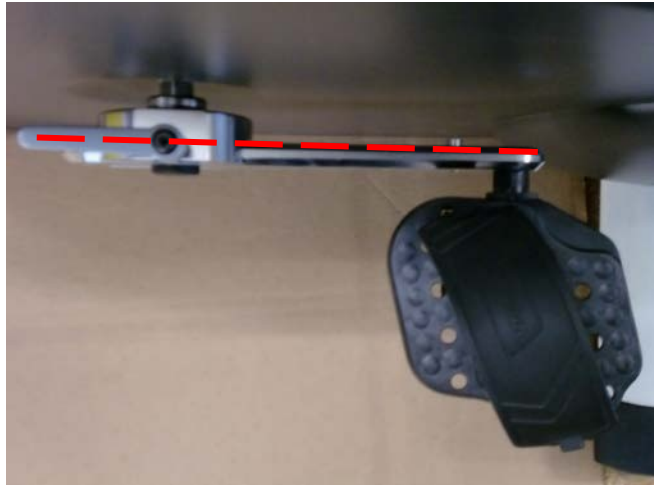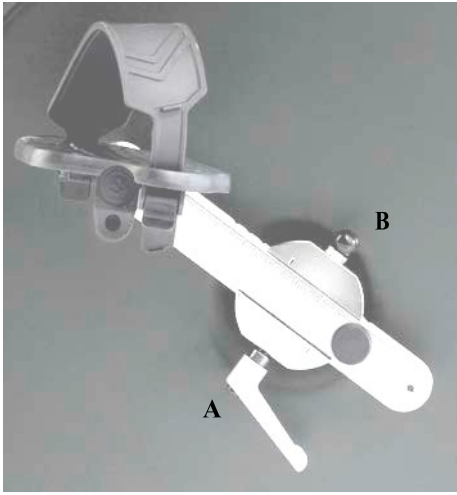

6 Garanti

Dette er baseret på den lovbestemte garanti.

EMOTION FITNESS GmbH & Co KG vil som forhandler af dette produkt yde gratis service i flere måneder på reservedele og arbejdskraft til professionelle brugere, hvis det kan påvises, at den korrekte brug og pleje, der er anført i denne manual, kan påvises.

Garantien bortfalder, hvis produktet er blevet serviceret eller repareret af uautoriserede personer. Så snart der opstår et garantikrav, skal du straks informere EMOTION FITNESS GmbH & Co KG herom. Oplysninger om udstyrets serienummer, købstidspunktet og leveringskilden skal gives af udstyrets ejer.

EMOTION FITNESS GmbH & Co KG sørger for en service, men forbeholder sig retten til at bestemme, hvilken type service der skal ydes.

Følgende procedurer er tænkelige.

1. Servicen udføres på stedet af vores serviceafdeling.
2. Vi sender den ønskede reservedel.
3. Vi sender en erstatningsenhed.

De defekte dele skal returneres til os af kunden inden for 48 timer. Ellers vil de leverede reservedele blive opkrævet.

Hvis årsagerne ligger uden for garantien, forbeholder EMOTION FITNESS GmbH & Co. KG sig ret til at opkræve alle reparationsomkostninger.

Visse sliddele er ikke dækket af garantien. Det drejer sig især om sadlen, krankpedaler og krankbeslag, pedaler, pedalremme, batterier, fodtrin, polstringsstoffer og gummigreb på styret. Polar pulse-systemer er omfattet af den lovpligtige garanti.

Disse garantibestemmelser påvirker på ingen måde de generelle lovbestemte krav.

Vores generelle leveringsbetingelser og leveringsbetingelser, som ændres fra tid til anden, kan ses og downloades fra vores websted www.emotion-fitness.de.



emotion fitness GmbH & Co KG

Trippstadter Str. 68

67691 Hochspeyer

Tlf. +49-6305-71499-0

Fax +49-6305-71499-111

info@emotion-fitness.de

www.emotion-fitness.de

Producent EUDAMED SRN: DE-MF-000016584