



Käyttöohjeet **polkupyöraergometrien ja ylävartaloergometriin** **säädettävä kampi**



1 Yleistä




Lue tämä käyttöohje ja kaikki turvallisuusohjeet ja varoitukset huolellisesti **ennen ensimmäistä käyttöä**, jotta varmistetaan turvallinen ja asianmukainen käyttö. Säilytä tämä asiakirja myöhempää käyttöä varten ja anna se muille, jos luovutat laitteen eteenpäin.

2 Yleiskatsaus

- Pyörä: säde säädettävissä 75mm ja 175mm välillä.
- Tuotenumero: Z-EF-AL-011/ Z-MED-AL-011 (lääketieteellinen versio).
- Runko: säde säädettävissä 75 mm:n ja 225 mm:n välillä, kahvojen asynkronisesta asennosta synkroniseen asentoon siirtyminen mahdollista.
- Valmistettu kokonaan ruostumattomasta ja haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä.
- Turvallinen ja helppo säätö - ilman työkaluja
- Erittäin vankka rakenne

längenverstellbares Kurbelset Z-MED-AL-011

adjustable crank arm set

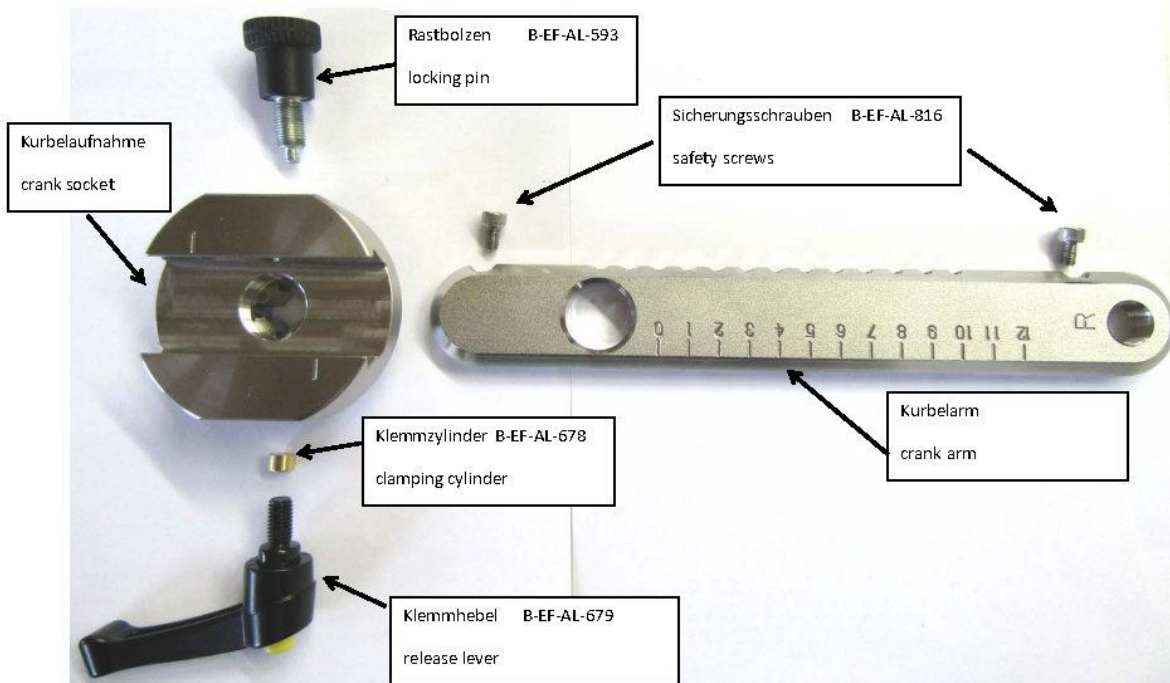

Komponenten ohne Artikelnummer können nicht separat gekauft werden, sondern gehören zu einem kompletten Kurbelset

Parts without article number are not sold seperatly. They are only available as part of a set of adjustable crank arms

3 Hoito ja kunnossapito

Huomio: Kiristä kampiakselit ja polkimet uudelleen.

Ensimmäisten 10 käyttötunnin jälkeen kampiakselit ja polkimet on kiristettävä. Jos polkimia ja kampiakseleita ei kiristetä, akseli, kampiakselit tai polkimet voivat vaurioitua, jolloin takuu raukeaa.

4 Kokoonpano-ohjeet

4.1 Kokoonpanoon tarvittavat työkalut:

- Pieni uraruuvimeisseli
- Avokoloavain SW 15 / 17 / 19
- Kuusikulmainen hylsy SW 14
- Kampiakselin ulosvetäjä
- Momenttiavain asetettu 60Nm:iin

4.2 Vaihe 1 - Polkimien irrottaminen

Irrota polkimet vasemmalta ja oikealta puolelta käyttämällä jakoavainta SW15. **Huomio:** Vasemmalla puolella ruuviliitettä avautuu UZS:n sisään, oikealla puolella UZS:ää vasten.

4.3 Vaihe2 - Kampiakselin ruuviliitoksen irrottaminen akseliin

Irrota pienellä uraruuvimeisselillä oikealla ja vasemmalla oleva pieni musta muovikorkki, joka peittää kampiakselin ruuviliitoksen. Löysää nyt ruuviliitokset molemmin puolin momenttiavaimella ja kuusiokoloavaimella SW. 14.

4.4 Vaihe 3 - Kampiakselin irrottaminen akselistä

Ruuvaa ulosvetäjä käsin akselin kiinnityksen kierteeseen. Käännä UZS:ssä olevan ulosvetäjän 17ruuvia avokoloavaimella SW, kunnes kampi on löystynyt; kampi voidaan nyt helposti irrottaa. Irrota vetolaite kampiakselista avokoloavaimella SW19 ja palauta se alkuperäiseen asentoonsa kääntämällä sitä UZS:ää vasten. Toimi samalla tavalla kampiakselin toisella puolella.

4.5 Vaihe 4 - Säädettävien kampien asentaminen


Irrota mustat suojukset molempien kampien aukoista. Jos kampiakselit eivät ole vielä asennettu asentoon o, saat ne kokoonpanoa varten tarvittavaan asentoon o avaamalla kiinnitysvipua ja vetämällä vapautuspainiketta. Kampiakselit on merkitty L:llä vasemmalle puolelle ja R:llä oikealle puolelle, varmista, että ne ovat oikeassa asennossa, muutoin polkimet voivat irrota. Aseta kampi, jonka L-kirjain on vasemmalla puolella, akselin neliöön. Ruuvaa nyt aiemmin irrottamasi pultti takaisin akseliin momenttiavaimella ja kiristä se 60Nm:iin. Tee sama toisella puolella.

4.6 Vaihe 5 - Polkimien asentaminen

Polkimissa on myös merkintä L vasemmalle ja R oikealle. Varmista asennuksen yhteydessä, että vasen puoli on ruvattu UZS:ää vasten ja oikea puoli UZS:ää vasten. Kiristä polkimet hyvin tiukasti, muuten ne voivat irrota.

5 V-kahvan käyttö

Kuten kohdassa lyhyesti4 on esitetty, V-haarojen pituutta voidaan säätää löysäämällä kiinnitysvipua (A) ja vetämällä lukituspultista (B). Kampinjan asento voidaan lukea sivussa olevasta asteikosta. Kun kampi on säädetty, on ehdottomasti varmistettava, että lukituspultti (B) on kytketty ja kiinnitysvipu (A) on lukittu ja kohdistettu kampiin (ks. kuva). Jotta kiinnitysvipu saadaan kohdistettua, sitä voidaan nostaa hieman lukitusasennossa ja viedä haluttuun asentoon. Muussa tapauksessa käyttäjä voi loukkaantua tai kampi ja kone voivat vaurioitua.

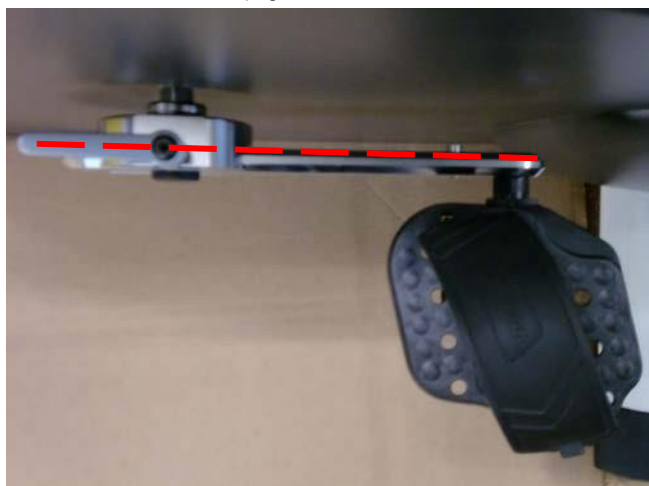

6 Takuu

Tämä perustuu lakisääteiseen takuuseen.

EMOTION FITNESS GmbH & Co KG tämän tuotteen jälleenmyyjänä tarjoaa ammattikäyttäjille kuukausien6 ajan ilmaisen huoltopalvelun osien ja työvoiman osalta, jos tässä käyttöohjeessa mainittu asianmukainen käyttö ja hoito voidaan osoittaa.

Takuuoikeus raukeaa, jos tuote on huollettu tai korjattu valtuuttamattomien henkilöiden toimesta. Heti kun takuuvaatimus ilmenee, sinun on ilmoitettava siitä välittömästi EMOTION FITNESS GmbH & Co KG:lle. Laitteen omistajan on annettava tiedot laitteen sarjanumerosta, ostoajankohdasta ja hankintalähteestä.

EMOTION FITNESS GmbH & Co KG järjestää palvelun, mutta pidättää itsellään oikeuden päättää palvelun luonteesta.

Seuraavat menettelyt ovat mahdollisia.

1. Huolto-osastomme suorittaa huollon paikan päällä.
2. Lähetämme haluamasi varaosan.
3. Lähetämme korvaavan yksikön.

Asiakkaan on palautettava violliset osat meille 48 tunnin kuluessa. Muussa tapauksessa toimitetut varaosat veloitetaan.

Jos syyt eivät kuulu takuun piiriin, EMOTION FITNESS GmbH & Co. KG pidättää oikeuden veloittaa kaikki korjauskustannukset.

Takuu ei kata joitakin kuluvia osia. Näitä ovat erityisesti satula, kampi ja kampiakselin kiinnitys, polkimet, polkimen hihnat, akut, jalkaterät, verhoilukankaat ja ohjaustangon pitokumi. Polar-pulssijärjestelmällä on lakisääteinen takuu.

Nämä takuusäännökset eivät millään tavoin vaikuta yleisiin lakisääteisiin vaatimuksiin.

Yleiset toimitusehtomme, sellaisina kuin ne ovat ajoittain muutettuina, ovat nähtävissä ja ladattavissa verkkosivuiltamme www.emotion-fitness.de.



emotion fitness GmbH & Co KG

Trippstadter Str. 68

67691 Hochspeyer

Puh. 06305-71499-0

Faksi 06305-71499-111

info@emotion-fitness.de

www.emotion-fitness.de

Valmistaja EUDAMED SRN: DE-MF-000016584

