



Οδηγίες χρήσης για το

Εργοόμετρο πεντάλ με μανιβέλα του *motion cardio line 900 & motion cardio line 900 med*



motion cycle 900
motion cycle 900 med



motion relax 900
motion relax 900 med



motion body 900
motion body 900 med

Περιεχόμενα

1.	Γενικές πληροφορίες.....	3
2.	Ταξινόμηση των συσκευών.....	3
3.	Οδηγίες ασφαλείας.....	4
	Ασφαλής εγκατάσταση των συσκευών	4
	Ασφαλής εκπαίδευση	6
	Ενδείξεις και αντενδείξεις.....	9
4.	Λειτουργία της οθόνης	10
	Επισκόπηση των λειτουργιών οθόνης/κουμπιών	10
	Επιλογή προγράμματος	11
	Συστήματα παλμών.....	11
	Επαγωγική φόρτιση (προαιρετικά).....	12
5.	Φροντίδα, συντήρηση και εξυπηρέτηση	13
	Οδηγίες για την ανίχνευση κατάστασης σφάλματος (σφάλμα)	17
	Οδηγίες συντήρησης για τον χειριστή	17
	Συντήρηση από εξουσιοδοτημένο ειδικό.....	17
	Βαθμονόμηση/συντήρηση.....	18
6.	Τεχνικά στοιχεία*.....	18
7.	Διάθεση αποβλήτων	18
8.	Εγγύηση.....	19

1. Γενικές πληροφορίες



Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες χρήσης, συμπεριλαμβανομένων όλων των οδηγιών ασφαλείας και των προειδοποιήσεων, **πριν χρησιμοποιήσετε** τον εκπαιδευτικό εξοπλισμό για **πρώτη φορά, ώστε** να διασφαλίσετε ότι χρησιμοποιείται με ασφάλεια και σύμφωνα με τον προορισμό του. Φυλάξτε το παρόν έγγραφο για μελλοντική αναφορά και παραδώστε το σε περίπτωση μεταβίβασης της συσκευής.

Σκοπός των συσκευών είναι η καρδιοαναπνευστική εκπαίδευση και η αναπαραγωγίμη καταπόνηση του σώματος, π.χ. για διαγνωστικά και θεραπευτικά μέτρα. Ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται κυρίως από χρήστες στην καρδιολογία, τη φυσιοθεραπεία, την αθλητιατρική και στο σπίτι. Χρησιμοποιούνται επίσης για την ανάπτυξη και την ενδυνάμωση των σκελετικών μυών και την αύξηση της κινητικότητας των αρθρώσεων που επηρεάζονται κατά την προπόνηση. Ο εξοπλισμός επιτρέπει την αναπαραγωγίμη φυσική καταπόνηση του ανθρώπινου σώματος και του καρδιαγγειακού συστήματος για σκοπούς πρόληψης, αποκατάστασης και διάγνωσης.

Το κείμενο με γκρι φόντο υποδεικνύει τμήματα κειμένου που αφορούν αποκλειστικά τα χαρακτηριστικά εξοπλισμού των συσκευών της σειράς fitness.

2. Ταξινόμηση των συσκευών


- Οι συσκευές *cardio line 900 med* είναι ιατρικά προϊόντα **MD** σύμφωνα με την οδηγία EU 2017/745, κατηγοριοποιημένα στην κατηγορία IIa. Στην περιοχή ελέγχου του φρένου, η ακρίβεια της ένδειξης είναι +/- 5% ή +/- 3 Watt για φορτία κάτω των 50 Watt.
- Οι συσκευές *cardio line 900* συμμορφώνονται με τα πρότυπα DIN EN ISO 20957-1 και DIN EN ISO 20957-5, κλάση εφαρμογής S (εμπορική χρήση/στούντιο) και H (οικιακή χρήση) της κλάσης ακρίβειας A +/- 10 % και έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για τον τομέα της γυμναστικής και του αθλητισμού.

Μόνο ένα άτομο μπορεί να προπονείται στον εξοπλισμό κάθε φορά- το μέγιστο βάρος χρήστη που αναφέρεται στην πινακίδα τύπου δεν πρέπει να ξεπεραστεί.

3. Οδηγίες ασφαλείας

Ασφαλής εγκατάσταση των συσκευών

motion cycle 900
motion cycle 900 med

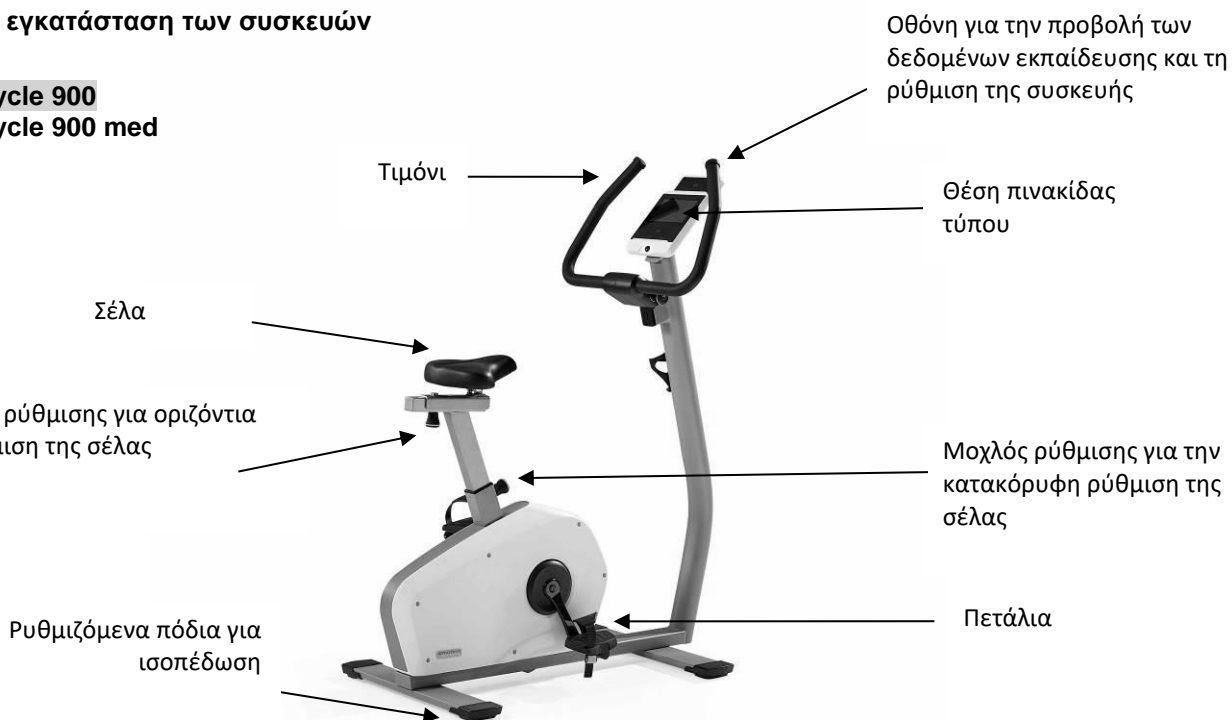

Σχ.1: Όψη της συσκευής motion cycle 900 & motion cycle 900 med με την ονομασία των κύριων στοιχείων και των μερών εφαρμογής

motion relax 900
motion relax 900 med



Σχ.2: Όψη της συσκευής motion relax 900 & motion relax 900 med με την ονομασία των κύριων στοιχείων και των τμημάτων εφαρμογής

motion body 900
motion body 900 med



Σχ.3: Όψη της συσκευής motion body 900 & motion body 900 med με την ονομασία των κύριων στοιχείων και των μερών εφαρμογής


motion body 900 WM
motion body 900 med WM

Θέση πινακίδας

Οθόνη για την προβολή των δεδομένων εκπαίδευσης και τη ρύθμιση της συσκευής

Αποσύνδεση ρύθμισης ύψους, κουμπί "+/-"


Χειρολαβές & ρυθμιζόμενη μανιβέλα

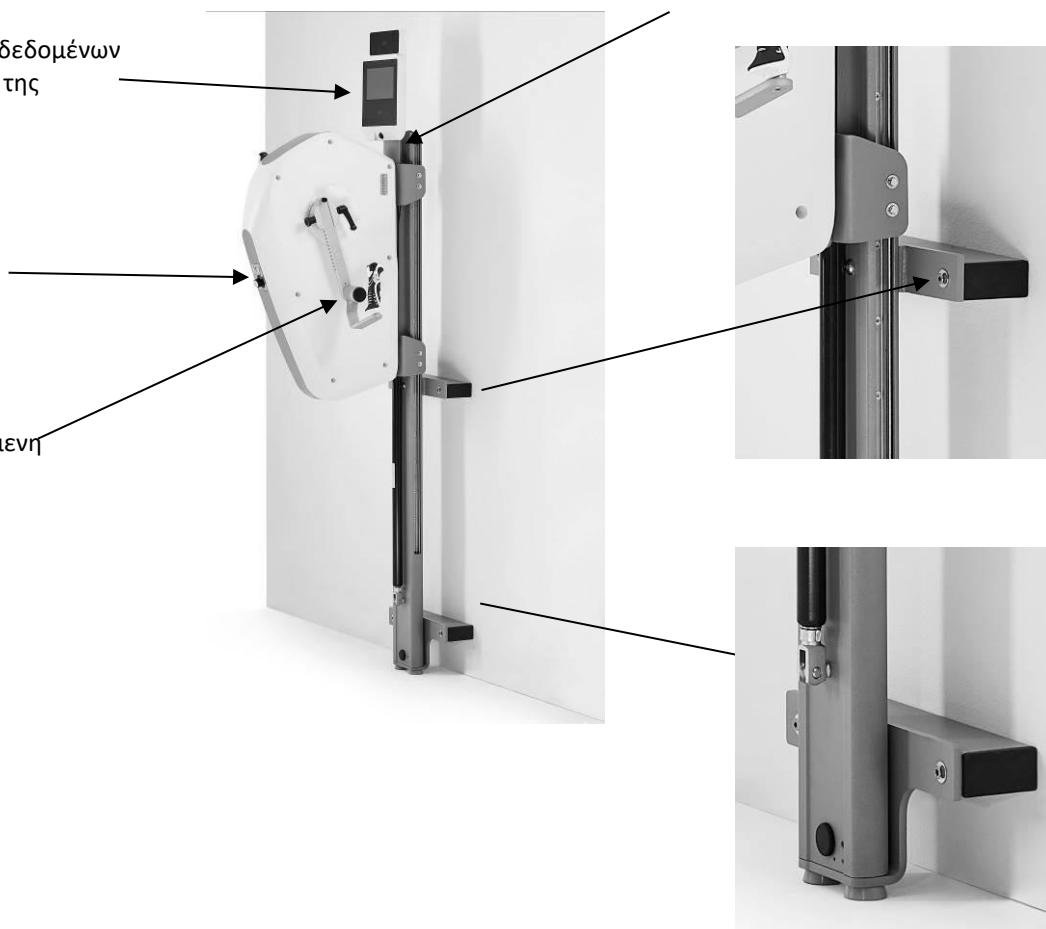


Σχ.4: motion body 900 & motion body 900 med με τα ονόματα των κύριων στοιχείων και των μερών εφαρμογής

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την επίτοιχη έκδοση, βεβαιωθείτε ότι τα επιτοίχια στηρίγματα είναι σωστά και σταθερά στερεωμένα στη συσκευή και στον τοίχο. Αρχικά, πρέπει να ελεγχθεί η δομή του τοίχου και μόνο αν ο τοίχος είναι από σκυρόδεμα ή συμπαγή τοιχοποιία μπορεί να στερεωθεί με ασφάλεια η συσκευή με τη χρήση τυποποιημένων βυσμάτων τοίχου. Για κάθε βιδωτή σύνδεση, πρέπει να γίνεται τουλάχιστον

Πρέπει να εξασφαλίζεται οριζόντιο εφελκυστικό φορτίο 1000 N, ώστε η συσκευή να παραμένει μόνιμα σταθερή σε όλες τις συνθήκες. Η στερέωση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένη εταιρεία που παρέχει επίσης εγγύηση για την εργασία της- το υλικό στερέωσης πρέπει επίσης να προμηθεύεται από την εξειδικευμένη εταιρεία και να προσαρμόζεται στις ιδιότητες του τοίχου. Για παράδειγμα, συνιστούμε τη χρήση πείρων Fischer SXRL 14x80 mm με μακρύ άξονα και συντονισμένων βιδών FUS 10 mm Ø.

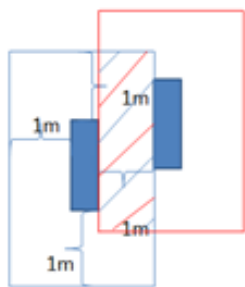

- Τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερή, οριζόντια, επίπεδη και αντλιοσθητική επιφάνεια και ισιώστε τη συσκευή με τις βίδες ρύθμισης ώστε να μην ταλαντεύεται.
- Η ελεύθερη περιοχή γύρω από τη συσκευή πρέπει να είναι τουλάχιστον 1 μέτρο μεγαλύτερη από την περιοχή κίνησης της συσκευής, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση και έξοδος από τη συσκευή, ακόμη και σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Ωστόσο, οι αποστάσεις ασφαλείας ενδέχεται να επικαλύπτονται (βλ. εικόνα).

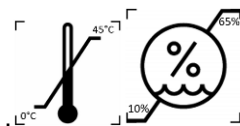

- Τοποθετείτε τη συσκευή μόνο σε ξηρούς χώρους σε θερμοκρασία , 10°C

- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, π.χ. από ραδιοφωνικές κεραίες, λαμπτήρες φθορισμού που ακτινοβολούν κ.λπ., καθώς αυτές μπορούν να επηρεάσουν τη μέτρηση των παλμών.
- Η κάτω πλευρά του πλαισίου πρέπει πάντα να είναι ελεύθερη για να εξασφαλίζεται επαρκής εξαερισμός.
- Όλα τα εργομετρικά πεντάλ που αναφέρονται εδώ είναι ανεξάρτητα από το δίκτυο. Παράγουν το δικό τους ρεύμα κατά τη λειτουργία ή τροφοδοτούνται με ρεύμα κατά τον προγραμματισμό από τον πυκνωτή που είναι εγκατεστημένος στο βασικό εξοπλισμό. Ο πυκνωτής φορτίζεται κατά τη διάρκεια της προπόνησης και έχει διάρκεια ζωής > 20000 κύκλων.
- Προσοχή: Τηρείτε πάντοτε τις οδηγίες φροντίδας, συντήρησης και συντήρησης στο κεφάλαιο 5 του παρόντος εγχειριδίου.

Ασφαλής εκπαίδευση

- Πριν από την έναρξη της προπόνησης, η καταλληλότητα για προπόνηση πρέπει να ελέγχεται από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, π.χ. γιατρό. Ανατρέξτε στην ενότητα "Ενδείξεις και αντενδείξεις".
- Λάβετε υπόψη ότι η υπερβολική εκπαίδευση μπορεί να είναι επιβλαβής.
- Εάν αισθανθείτε ναυτία ή ζάλη, σταματήστε αμέσως την προπόνηση και συμβουλευτείτε έναν γιατρό.
- Η προπόνηση στον εξοπλισμό επιτρέπεται μόνο με άθικτο δέρμα.
- Κατά την προπόνηση, συνιστάται να φοράτε στενά, ελαφριά αθλητικά ρούχα που δεν μπορούν να πιαστούν σε μέρη της συσκευής κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Φοράτε πάντα κατάλληλα αθλητικά παπούτσια για να εξασφαλίζετε ασφαλές πάτημα στα πεντάλ.
- Πριν ξεκινήσετε την εκπαίδευση, ελέγξτε τη συσκευή για σταθερότητα, ελαττωματικά εξαρτήματα ή ενδεχόμενους χειρισμούς. Εάν έχετε ανακαλύψει ελαττώματα ή δεν είστε σίγουροι, ρωτήστε τον επόπτη πριν ξεκινήσετε την εκπαίδευση.
- Πριν από την έναρξη της εκπαίδευσης, πρέπει να διασφαλίζεται ότι κανείς δεν βρίσκεται κοντά στα κινούμενα μέρη, ώστε να μην τίθενται σε κίνδυνο τρίτοι. Ειδικότερα, τα παιδιά χωρίς επίβλεψη πρέπει να παραμένουν μακριά από τον εξοπλισμό.
- **cycle/relax:** Για να προπονηθείτε εμβιομηχανικά σωστά, το γόνατο δεν πρέπει ποτέ να είναι πλήρως εκτεταμένο-ρυθμίστε ανάλογα το κάθισμα της συσκευής. Με το cycle 900 / 900 med, μπορεί να αλλάξει τόσο η οριζόντια όσο και η κάθετη θέση καθίσματος. Για την κάθετη θέση καθίσματος, τραβήξτε τον κοχλία ασφάλισης στο μπροστινό μέρος του στύλου καθίσματος και ρυθμίστε το ύψος χειροκίνητα. Για να αυξήσετε τη θέση καθίσματος πιο εύκολα, μπορείτε να τραβήξετε το στύλο του καθίσματος προς τα πάνω χωρίς να ξεκλειδώσετε το μπουλόνι ασφάλισης. Ο κοχλίας ασφάλισης ασφαλίσει αυτόματα στην πλησιέστερη χαμηλότερη οπή. Το στύλο του καθίσματος μπορεί να ρυθμιστεί περαιτέρω προς τα κάτω τραβώντας το μπουλόνι ασφάλισης. **Ασφάλεια:** Βεβαιωθείτε ότι το μπουλόνι ασφάλισης ασφαλίσει σταθερά και ακουστικά πριν φορτώσετε τη σέλα. Η θέση της σέλας υποδεικνύεται από μια κλίμακα στο πλάι του στύλου της σέλας, διευκολύνοντας την εύρεση του προσωπικού σας ύψους σέλας κατά την επαναλαμβανόμενη προπόνηση. Αυτό θα πρέπει να επιλέγεται έτσι ώστε να εξακολουθεί να υπάρχει κάμψη του γόνατος περίπου 10° στη χαμηλότερη θέση πεντάλ.



Σχ.5: Οριζόντια και κάθετη ρύθμιση της θέσης του καθίσματος στο **cycle 900** & **cycle 900 med**

- Για την οριζόντια τοποθέτηση στο **ποδήλατο**, πρέπει να απελευθερωθεί η κίτρινη λαβή σύσφιξης με ελαστικό πίσω από τη σέλα. Η σέλα μπορεί στη συνέχεια να μετακινηθεί προς τα εμπρός ή προς τα πίσω. Η οριζόντια θέση της σέλας επηρεάζει την κλίση του άνω μέρους του σώματος και το φορτίο που ακουμπά στα χέρια κατά την προπόνηση.




Εικ.6: Ρύθμιση τιμονιού στο **cycle 900** & **cycle 900 med**

- Με την προαιρετική ρύθμιση του τιμονιού, πρέπει να φροντίσετε να διασφαλίσετε ότι η κίτρινη λαβή σύσφιξης με καουτσούκ σφίγγεται ξανά μετά τη ρύθμιση και πριν από την προπόνηση.





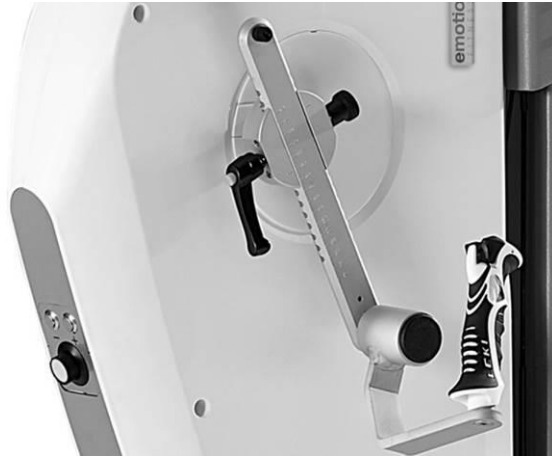

Εικ.7: Οριζόντια ρύθμιση της θέσης του καθίσματος και της πλάτης στο **relax 900** & **relax 900 med**

- Για την οριζόντια τοποθέτηση στη **χαλάρωση**, ο κίτρινος μοχλός απελευθέρωσης πρέπει να τραβηχτεί προς τα πάνω. Η μονάδα καθίσματος μπορεί στη συνέχεια να μετακινηθεί στην επιθυμητή θέση. Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα καθίσματος ασφαλίζει και πάλι σταθερά. Ρυθμίστε την πλάτη στην επιθυμητή θέση. Βεβαιωθείτε ότι ασφαλίζει στις προβλεπόμενες οπές.



Σχ.8: Κατακόρυφη ρύθμιση της μονάδας κίνησης και του ρυθμιζόμενου στροφάλου στο **body 900 & body 900 med** ή **body 900 WM** και **body 900 med WM**

- **σώμα:** Προκειμένου να προπονηθείτε εμβιομηχανικά σωστά με το σώμα, μετακινήστε τη μονάδα κίνησης έτσι ώστε η υποδοχή της μανιβέλας στη συσκευή να βρίσκεται περίπου στο ύψος της άρθρωσης του ώμου. Στη συνέχεια, ρυθμίστε ανάλογα το μήκος του στροφάλου στους ρυθμιζόμενους στροφάλους. Ο κοχλίας ασφάλισης του ρυθμιζόμενου στροφάλου πρέπει να ξαναμπλέκεται μετά τη ρύθμιση και στη συνέχεια να σφίγγεται ο μοχλός σύσφιξης.

-  **Προειδοποίηση:** Το σύστημα παρακολούθησης καρδιακού ρυθμού είναι επιρρεπές σε δυσλειτουργίες. Η υπερβολική προπόνηση μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνους τραυματισμούς ή θάνατο. Εάν αισθανθείτε αδιαθεσία, σταματήστε αμέσως την προπόνηση και συμβουλευτείτε το γιατρό ή το θεραπευτή σας.
-  **Προειδοποίηση:** Η συσκευή επιτρέπεται να λειτουργεί μόνο με το περίβλημα και σε ξηρούς χώρους.
-  **Προειδοποίηση για την προαιρετική σύνδεση ρεύματος:** Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα τροφοδοτικά που έχουν ελεγχθεί σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60601-1 και έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα είναι τοποθετημένο με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δύσκολη η αποσύνδεσή του (π.χ. μέσω κουτιών δαπέδου, τοποθέτηση κάτω από τη συσκευή ή τους αγωγούς καλωδίων, τοποθέτηση του τροφοδοτικού σε χώρους με δύσκολη πρόσβαση).
-  **Προειδοποίηση:** Σε περίπτωση τροποποίησης του ιατροτεχνολογικού προϊόντος, πρέπει να διενεργούνται κατάλληλες δοκιμές και επιθεωρήσεις για να διασφαλίζεται η συνεχής ασφαλής χρήση. Η συσκευή δεν πρέπει να τροποποιείται χωρίς την άδεια του κατασκευαστή.

Ενδείξεις και αντενδείξεις

Πριν ξεκινήσετε την προπόνηση, συμβουλευτείτε έναν γιατρό ή θεραπευτή για να βεβαιωθείτε ότι είστε σε θέση να προπονηθείτε.

Υποδειγματικές ενδείξεις

- Κινητικότητα του μυοσκελετικού συστήματος
- Ενίσχυση των μυών
- Ενίσχυση του καρδιαγγειακού συστήματος

Παραδείγματα αντενδείξεων

- Καρδιαγγειακές παθήσεις
- Πόνος του μυοσκελετικού συστήματος
- Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης:
 - Πόνος στην περιοχή του θώρακα
 - Δυσφορία
 - Ναυτία
 - Ζάλη
 - Δύσπνοια

Ρωτήστε το γιατρό σας εάν παίρνετε φάρμακα.

4. Λειτουργία της οθόνης


Διάφορα προγράμματα προπόνησης και δοκιμών επιτρέπουν την ατομική και ποικίλη προπόνηση με τα μηχανήματα motion cardio line 900 και motion cardio line 900 med.

	body 900 / 900 med	relax 900 / 900 med	cycle 900 / 900 med
Βασικός εξοπλισμός	Γρήγορη εκκίνηση, προπόνηση χρόνου, προπόνηση παλμού		
Συμπεριλαμβανομένου του πακέτου προγράμματος	Γρήγορη εκκίνηση Προκρίσεις Εκπαίδευση παλμών + 7 περαιτέρω προγράμματα	Γρήγορη εκκίνηση Προκρίσεις Εκπαίδευση παλμών + 4 περαιτέρω προγράμματα ισορροπίας κίνησης	Γρήγορη εκκίνηση Προκρίσεις Εκπαίδευση παλμών + 7 περαιτέρω προγράμματα + 4 προγράμματα ισορροπίας κίνησης + 6 προγράμματα δοκιμών

Επισκόπηση των λειτουργιών οθόνης/κουμπιών



PAUSE

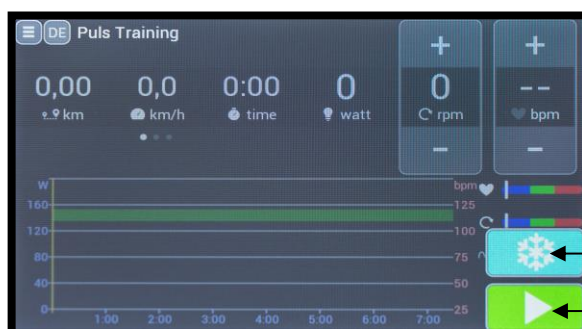

COOL

PLAY

Εικ. 9: Προβολή οθόνης, για να εξηγήσει τις λειτουργίες των κουμπιών, η πραγματική προβολή μπορεί να διαφέρει ως προς το χρώμα, η ανάθεση των κουμπιών είναι η ίδια.

Επεξήγηση των κουμπιών:

- Το **home button** είναι ένα φυσικό κουμπί κάτω από το γυαλί της οθόνης. Πατιέται για να αποκτήσετε πρόσβαση στο κύριο μενού. Ένα παρατεταμένο πάτημα (τουλάχιστον 6 δευτερόλεπτα) στο κουμπί HOME επαναφέρει τα ηλεκτρονικά της οθόνης.
- Πατήστε το κουμπί **PAUSE** για να διακόψετε τη συνεδρία προπόνησης.
- Η εκπαίδευση μπορεί να ξεκινήσει ή να συνεχιστεί πατώντας το κουμπί **PLAY**.
- Το κουμπί **COOL** τερματίζει αμέσως τη συνεδρία προπόνησης. Μια σύνοψη των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσης δημιουργείται αμέσως, εμφανίζεται και, εάν είναι απαραίτητο, αποστέλλεται σε συμβατό λογισμικό ελέγχου εκπαίδευσης.
- Χρησιμοποιήστε το **κουμπί "+"** ή το **κουμπί "-"** για να αυξήσετε ή να μειώσετε τις προς ρύθμιση παραμέτρους ή τιμές ισχύος.
- Χρησιμοποιήστε τα **κουμπιά βέλους** για να πλοηγηθείτε στα αντίστοιχα μενού και να επιβεβαιώσετε τιμές ή ρυθμίσεις.
- Μπορείτε να πλοηγηθείτε στην επιλογή προγραμμάτων με κινήσεις σάρωσης/σύρσιμο.

Ανάλογα με το πρόγραμμα, εμφανίζονται ορισμένες από τις ακόλουθες παραμέτρους:

- Όνομα προγράμματος.
- Χρόνος: Χρόνος προπόνησης που έχει ολοκληρωθεί ή που απομένει.
- Καρδιακός ρυθμός: Εμφάνιση καρδιακού ρυθμού όταν χρησιμοποιείτε συμβατή ζώνη πομπού καρδιακού ρυθμού. Η ένδειξη καρδιακού ρυθμού δείχνει το τρέχον εύρος καρδιακού ρυθμού για προγράμματα με στόχο ή μέγιστο

καρδιακό ρυθμό. Η ένδειξη προφίλ στην οθόνη δείχνει την εξέλιξη του εύρους έντασης κατά τη διάρκεια της προπόνησης.

- Watt: Η ισχύς εμφανίζεται σε Watt. Ταυτόχρονα, η ένταση εμφανίζεται γραφικά στο προφίλ.
- km/h: Η πλασματική ταχύτητα εμφανίζεται σε km/h.
- Ταχύτητα: Στροφές πεντάλ ανά λεπτό.
- L/R (όχι για το σώμα 900/900 med): Ο λόγος δύναμης του αριστερού και του δεξιού ποδιού εμφανίζεται εδώ σε %.
- HRV: Η μεταβλητότητα του καρδιακού ρυθμού εμφανίζεται μέσω της τιμής RMSSD (απαιτεί αισθητήρα **POLAR** H10).
- resp: Αναπνευστικός ρυθμός (απαιτεί αισθητήρα **POLAR** H10)
- χλμ: Προστιθέμενη ή υπολειπόμενη απόσταση. Η ένδειξη είναι σε μέτρα, από 1000 m σε βήματα των 10 m (1,00 km).
- K-Cal: Προστιθέμενη ή εναπομένουσα κατανάλωση θερμίδων.
- Επίπεδο: Επίπεδο έντασης 1 - 21.
- ∅ Εάν οι παράμετροι συμπληρώνονται με αυτό το σύμβολο, πρόκειται για μέσες τιμές.

Αποτελέσματα


Μετά την ολοκλήρωση ενός προγράμματος προπόνησης ή με την πρόωρη ακύρωσή του μέσω του COOL ❄️, τα αποτελέσματα εμφανίζονται στην οθόνη και εκτελείται 3λεπτη ψύξη. Αυτό μπορεί να ακυρωθεί μέσω του κουμπιού HOME.

Ορισμένες από τις τιμές είναι μέσες (Watt, km/h, ταχύτητα, καρδιακός ρυθμός, υψόμετρο/λεπτό), άλλες είναι αθροιστικές (χιλιόμετρα, K-Cal, χρόνος, υψόμετρο). Οι μέσες τιμές επισημαίνονται με το σύμβολο ∅.

Τα αποτελέσματα αυτά καθιστούν δυνατή την παρακολούθηση της εξέλιξης των προσωπικών επιδόσεων και χρησιμεύουν έτσι ως κίνητρο.

Επιλογή προγράμματος

Το επιθυμητό εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορεί να επιλεγεί στο κύριο μενού πατώντας το αντίστοιχο εικονίδιο. Στη συνέχεια, θα μεταφερθείτε στη σελίδα διαμόρφωσης, όπου μπορείτε να ορίσετε τις σχετικές παραμέτρους προπόνησης. Πατήστε το κουμπί **PLAY** ▶ για να επιβεβαιώσετε την καταχώρησή σας και να ξεκινήσετε το πρόγραμμα προπόνησης. Μπορείτε να επιστρέψετε στο κύριο μενού μέσω του εικονιδίου home ή του κουμπιού home.

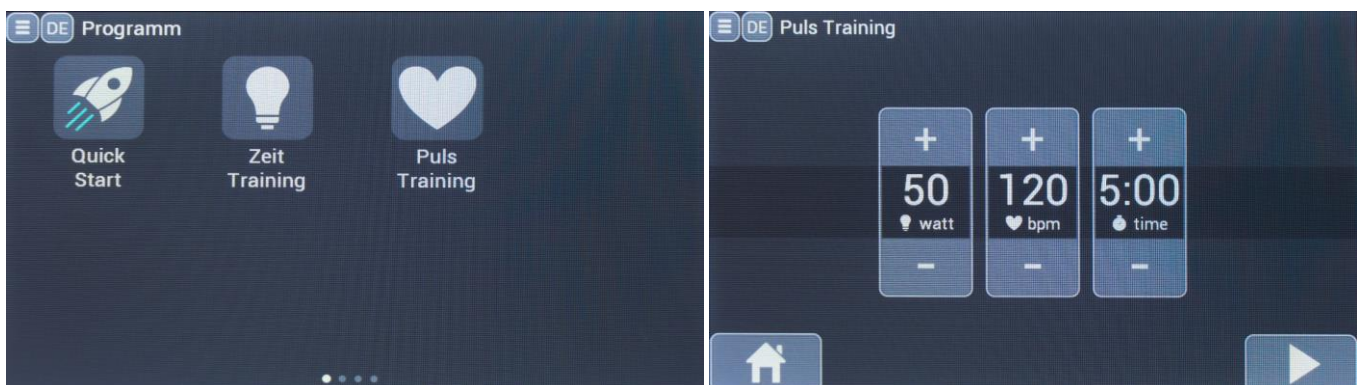


Σχήμα 10: Επιλογή και διαμόρφωση προγράμματος για χειροκίνητη εκπαίδευση.

Συστήματα παλμών

Οι συσκευές **motion cardio line 900** και **motion cardio line 900 med** είναι εξοπλισμένες με το πρωτότυπο σύστημα παλμών **POLAR**, το οποίο χρησιμοποιεί έναν ιμάντα θώρακα για την καταγραφή των σημάτων ως πρότυπο. Αυτό επιτρέπει την ατομική προπόνηση σε διάφορα προγράμματα. Η ασύρματη μετάδοση δεδομένων στα ηλεκτρονικά της οθόνης είναι κωδικοποιημένη (είτε μέσω 5kHz είτε μέσω **Bluetooth**). Η νέα τεχνολογία "αυτόματης αντιστοίχισης" **POLAR** βασίζεται στην ασφαλή και χωρίς παρεμβολές μετάδοση δεδομένων μέσω Bluetooth. Αυτή η τεχνολογία απαιτεί τη χρήση των πομπών H10 ή H9. Άλλες παράμετροι, όπως η HRV και ο αναπνευστικός ρυθμός, μεταδίδονται επίσης στο μόνιτορ μέσω της σύνδεσης **Bluetooth**.

Εάν χρησιμοποιούνται οι παλιοί πομποί, π.χ. με κωδικό T31, υπάρχει συμβατότητα προς τα κάτω. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι ενδέχεται να υπάρξουν παρεμβολές κατά τη μετάδοση σήματος μέσω της τεχνολογίας 5 kHz.

Το χρώμα του συμβόλου της καρδιάς που αναβοσβήνει υποδεικνύει τη χρησιμοποιούμενη τεχνολογία.

ανοιχτό μπλε=**Bluetooth** πράσινο=5kHz σκούρο μπλε= (προαιρετικό βλέπε παρακάτω)

ANT+

Οι συσκευές **motion cardio line 900** και **motion cardio line 900 med** επιτρέπουν την προαιρετική μετάδοση δεδομένων μέσω **ANT+** εκτός από τη μετάδοση καρδιακών παλμών μέσω 5kHz/**Bluetooth**. Για το σκοπό αυτό απαιτείται το πακέτο επιδόσεων. Οι συσκευές **motion cardio line 900** και **motion cardio line 900 med** αναγνωρίζουν αυτόματα ένα

Πολικό σήμα 5kHz/**Bluetooth** ή σήμα **ANT+**. Για να αντιστοιχίσετε έναν αισθητήρα **ANT+**, ο χρήστης πρέπει να βρίσκεται ήδη στο επιθυμητό πρόγραμμα προπόνησης και ο αντίστοιχος αισθητήρας πρέπει να βρίσκεται κοντά στην ενσωματωμένη κεραία ασυρμάτου της οθόνης.

Ένα σκούρο μπλε σύμβολο καρδιάς που αναβοσβήνει επιβεβαιώνει τη μετάδοση του καρδιακού ρυθμού μέσω του **ANT+**.



Σχ. 11: Σύζευξη ενός αισθητήρα ANT+ για μετάδοση καρδιακών παλμών

Οδηγίες ασφαλείας σύμφωνα με το DIN EN ISO 20957

Προειδοποίηση! Τα συστήματα παρακολούθησης του καρδιακού ρυθμού μπορεί να είναι ανακριβή. Η υπερβολική προπόνηση μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές βλάβες στην υγεία ή στο θάνατο. Σταματήστε αμέσως την άσκηση εάν αισθανθείτε ζάλη ή λιποθυμία.

Επαγωγική φόρτιση (προαιρετικά)






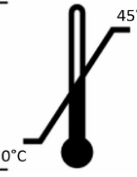


Μια προαιρετική μονάδα επαγωγικής φόρτισης μπορεί να ενεργοποιηθεί σε όλες τις συσκευές **motion cardio line 900** και **motion cardio line 900 med** μέσω του "πακέτου σύνδεσης". Αυτό επιτρέπει την ανέπαφη φόρτιση κινητών συσκευών που πληρούν το πρότυπο Qi (Qi). Συνιστάται στους χρήστες βηματοδοτών ή εμφυτευμένων απινιδωτών (ICD) να τηρούν ελάχιστη απόσταση 10 cm από το πηνίο φόρτισης.




5. Φροντίδα, συντήρηση και σέρβις

Όλος ο καρδιολογικός εξοπλισμός της emotion fitness είναι ανθεκτικός και απαιτεί ελάχιστη συντήρηση για να λειτουργεί ως εξοπλισμός προπόνησης για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, η απαραίτητη φροντίδα πρέπει να γίνεται με ευσυνειδησία.

⚠ Προειδοποίηση: Η συσκευή επιτρέπεται να ανοιχθεί μόνο από εξουσιοδοτημένο ειδικό.

Σύμβολα και σημασία

Σήμα ασφαλείας	Αναφορά	Τίτλος
	ISO 7010-P017	Απαγορεύεται η ώθηση
	ISO 7010-W012	Προειδοποίηση, ηλεκτρισμός
	ISO 7000-1641	Οδηγίες χρήσης
Sicherheitshinweis gemäß DIN EN ISO 20957 Warnung! Systeme der Herzfrequenzüberwachung können ungenau sein. Übermäßiges Trainieren kann zu ernsthaftem gesundheitlichem Schaden oder zum Tod führen. Bei Schwindel- Schwächegefühl sofort das Training beenden.	DIN EN ISO 20957	Οδηγίες ασφαλείας για την παρακολούθηση του καρδιακού ρυθμού
	ISO 7000-3082	Κατασκευαστής
	ISO 7000-2497	Ημερομηνία κατασκευής
	ISO 7000-0632	Περιορισμός θερμοκρασίας
	ISO 7000-2620	Υγρασία, περιορισμός
	ISO 7010-W001	Γενική προειδοποιητική πινακίδα

	ISO 7010-M002	Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης
	IEC 60417-5840	Μέρος εφαρμογής τύπου B (ισχύει για τη σέλα, τα πεντάλ και το τιμόνι)
	ISO 15233	Ιατρική συσκευή

Το επίπεδο ασφάλειας των συσκευών μπορεί να διατηρηθεί μόνο εάν οι συσκευές ελέγχονται τακτικά για βλάβες και φθορές. Τα ελαττωματικά εξαρτήματα πρέπει να αντικαθίστανται αμέσως και η συσκευή πρέπει να τίθεται εκτός λειτουργίας μέχρι να επισκευαστεί.

Διάγνωση σφαλμάτων

Ενδέχεται να εμφανιστούν τα ακόλουθα μηνύματα σφάλματος. Εάν το σφάλμα εμφανίζεται επανειλημμένα, τα μέτρα που παρατίθενται παρακάτω μπορούν να δώσουν λύση. Εάν αυτά δεν οδηγήσουν σε επιτυχία, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή/διανομέα και, εάν είναι απαραίτητο, με τον κατασκευαστή του λογισμικού.

Μήνυμα σφάλματος	Μέτρηση/s	Τύποι συσκευών που επηρεάζονται
"check heart sensor?"	Η οθόνη θέλει να ξεκινήσει ένα πρόγραμμα που απαιτεί τη χρήση αισθητήρα καρδιακών παλμών. Εάν δεν βρεθεί αισθητήρας, εμφανίζεται αυτό το μήνυμα. → Ελέγξτε τον αισθητήρα παλμών.	Όλες οι συσκευές της σειράς motion cardio 900
"FBB:Incomplete frame"	Σφάλμα FBB (Fly-By-Bluetooth®): όταν το τέλος ενός προς μετάδοση μηνύματος έχει φτάσει αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. → Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του λογισμικού ή της συσκευής.	Όλες οι συσκευές της σειράς motion cardio 900 → συμβαίνει μόνο με την ενσωμάτωση του συστήματος
"FBB:Bad packet type"	Σφάλμα FBB: άγνωστος τύπος μηνύματος στάλθηκε από το λογισμικό του υπολογιστή. → Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του λογισμικού ή της συσκευής.	Όλες οι συσκευές της σειράς motion cardio 900 → συμβαίνει μόνο με την ενσωμάτωση του συστήματος
"FBB:Bad block check"	Σφάλμα FBB- ο έλεγχος μπλοκ (παραγόμενο άθροισμα ελέγχου) δεν ταιριάζει με τον αναμενόμενο έλεγχο μπλοκ. → Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του λογισμικού ή της συσκευής.	Όλες οι συσκευές της σειράς motion cardio 900 → συμβαίνει μόνο με την ενσωμάτωση του συστήματος
"FFB:Missing ETX"	Σφάλμα FBB- το τέλος του μηνύματος δεν αντιστοιχεί στον χαρακτήρα "Τέλος μηνύματος". → Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του λογισμικού ή της συσκευής.	Όλες οι συσκευές της σειράς 900 motion cardio → συμβαίνει μόνο με την ενσωμάτωση του συστήματος
"FBB:Parser failed"	Σφάλμα FBB- το μήνυμα από τον υπολογιστή δεν αντιστοιχεί σε καθορισμένη μορφή μηνύματος. → Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του λογισμικού ή της συσκευής.	Όλες οι συσκευές της σειράς 900 motion cardio → συμβαίνει μόνο με την ενσωμάτωση του συστήματος
"FBB:UID mismatch"	Σφάλμα FBB- το αναγνωριστικό χρήστη που αποστέλλεται στο μήνυμα σύνδεσης δεν ταιριάζει με το αναγνωριστικό χρήστη από το μήνυμα προγράμματος. → Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του λογισμικού ή της συσκευής.	Όλες οι συσκευές της σειράς 900 motion cardio → συμβαίνει μόνο με την ενσωμάτωση του συστήματος
"Program not allowed"	Σφάλμα FBB- το λογισμικό έστειλε ένα πρόγραμμα που δεν είναι ενεργοποιημένο στη συσκευή. → Επιλέξτε ένα διαφορετικό πρόγραμμα στον υπολογιστή ή Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής για να το αγοράσετε.	Όλες οι συσκευές της σειράς 900 motion cardio → συμβαίνει μόνο με την ενσωμάτωση του συστήματος
"FBB:Missing input: ##"	Σφάλμα FBB, η παράμετρος ## λείπει από το μήνυμα του προγράμματος, αλλά απαιτείται (το πρόγραμμα δεν έχει ξεκινήσει). → Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του λογισμικού ή της συσκευής.	Όλες οι συσκευές της σειράς 900 motion cardio → συμβαίνει μόνο με την ενσωμάτωση του συστήματος
"Par ## out of range: ###<###<###<###"	Μια απαιτούμενη παράμετρος ρύθμισης στάλθηκε στη συσκευή από το λογισμικό H/Y εκτός του επιτρεπόμενου εύρους.	Όλες οι συσκευές της σειράς motion cardio 900

	→ Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του λογισμικού.	→ συμβαίνει μόνο με την ενσωμάτωση του συστήματος
"Profile> 50 steps"	Μήνυμα σφάλματος εάν πρόκειται να αναπαραχθεί ένα προφίλ με πάρα πολλά βήματα. → Μειώστε τον αριθμό των διαλειμματικών βημάτων στο πρόγραμμα PC (μόνο για διαλειμματικό πρόγραμμα) ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του λογισμικού ή της συσκευής.	Όλες οι συσκευές της σειράς 900 motion cardio → εμφανίζεται μόνο με την ενσωμάτωση του συστήματος και το επιλεγμένο πρόγραμμα διαστήματος
"Infocode: ### (μερικές φορές με πρόσθετο κείμενο)	Εμφανίζεται ο αριθμός σφάλματος της μονάδας ελέγχου κινητήρα MCU6. → Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής.	h/p/Cosmos διάδρομος
"Sprintex Err: A##:###"	Εμφανίζεται ο αριθμός σφάλματος του ελεγκτή Sprintex. → Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής.	Διάδρομος Sprintex
"Sprintex Err: \$-\$"	Εμφανίζεται ο αριθμός σφάλματος του ελεγκτή Sprintex. → Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής.	Διάδρομος Sprintex
"Sprintex Err: no reply"	Η οθόνη δεν λαμβάνει καμία απάντηση από τον ελεγκτή Sprintex. → Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής.	Διάδρομος Sprintex

Οδηγίες για την ανίχνευση κατάστασης σφάλματος (σφάλμα)

Εάν προκύψουν σφάλματα στις συσκευές που δεν μπορείτε να κατηγοριοποιήσετε, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την emotion fitness GmbH & Co KG. Για κάθε μήνυμα σφάλματος θα πρέπει να έχετε έτοιμο τον αριθμό σειράς και τον τύπο μοντέλου της ελαττωματικής συσκευής, καθώς αυτό μπορεί να είναι σημαντικό για να μπορέσουμε να κάνουμε τη σωστή διάγνωση και, κυρίως, να σας προμηθεύσουμε τα κατάλληλα ανταλλακτικά!

Οδηγίες συντήρησης για τον χειριστή

Ιδανικά, επιθεωρείτε οπτικά τη συσκευή πριν από κάθε χρήση, αλλά τουλάχιστον καθημερινά, και δώστε ιδιαίτερη προσοχή σε ελαττωματικά μέρη, χαλαρές συνδέσεις και άτυπους θορύβους.

Οι ακόλουθοι έλεγχοι πρέπει να διενεργούνται τουλάχιστον κάθε 6 μήνες:

- Ελέγξτε οπτικά όλες τις ορατές συνδέσεις και τις ραφές συγκόλλησης.
- Καθαρίστε καλά τη συσκευή.
- Ελέγξτε όλες τις βιδωτές συνδέσεις για στεγανότητα.
- Ελέγξτε την ακεραιότητα της σέλας και της σέλας και βεβαιωθείτε ότι η σέλα αντικαθίσταται μετά από 2 χρόνια για να αποφευχθεί η κόπωση του υλικού.
- Ελέγξτε την ακεραιότητα και την αντοχή των πεντάλ και των στροφάλων.

Σε γενικές γραμμές:

- Καθαρίζετε τακτικά τα πλαστικά μέρη της επένδυσης και του πλαισίου, όπως απαιτείται, με ένα υγρό πανί και ήπιο σαπούνι και, στη συνέχεια, σκουπίζετε ξανά.
- Δεν επιτρέπεται η χρήση φιαλών ψεκασμού με καθαριστικά- έχει αποδειχθεί ότι οι συσκευές δεν στεγνώνουν ποτέ σε δυσπρόσιτα σημεία. Η προσβολή από σκουριά δεν μπορεί να αποκλειστεί με αυτή τη διαδικασία.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν εισέρχεται υγρό στο περίβλημα της οθόνης.
- Καθαρίζετε την οθόνη μόνο με τα συνιστώμενα καθαριστικά οθόνης (<https://www.schupp.shop/therapie-praxisbedarf/praxisbedarf/reinigung-hygiene/displayreiniger?number=3912>)
- Χρησιμοποιείτε μόνο τα ευαίσθητα απολυμαντικά μαντηλάκια mikrozid® sensitive wipes (<http://www.schuelke.com/>) για κάθε απαραίτητη απολύμανση των συσκευών.
- Η οθόνη μπορεί να υποδεικνύει ότι η τάση του πυκνωτή είναι πολύ χαμηλή, οπότε δεν μπορεί να διασφαλιστεί ότι η συσκευή θα λειτουργήσει χωρίς ρεύμα πέδησης. Μπορείτε να επαναφορτίσετε τον πυκνωτή κάνοντας πετάλι με μεγαλύτερο φορτίο ή χρησιμοποιώντας μια μονάδα τροφοδοσίας που έχει εγκριθεί από τον κατασκευαστή της συσκευής.
- Ελέγξτε ότι οι στερεώσεις του περιβλήματος είναι σφιχτές.
- Ελέγχετε τακτικά τη λειτουργία των κοχλιών ασφάλισης.
- Συνιστούμε την τακτική οπτική επιθεώρηση όλων των μερών της συσκευής, ιδίως των βιδών, των μπουλονιών, των ραφών συγκόλλησης και των άλλων συνδέσμων.
- Ελέγξτε ότι τα πόδια της συσκευής είναι καλά τοποθετημένα.
- Ελέγξτε αν οι στροφαλοφόροι εξακολουθούν να είναι σταθερά συνδεδεμένοι με τον άξονα. Θα χρειαστείτε ένα κλειδί με καρυδάκι 14 mm για το σκοπό αυτό.
- Σημαντικό: Σφίξτε ξανά μετά τις πρώτες 10 ώρες χρήσης! Οι κατεστραμμένες μανιβέλες και άξονες που οφείλονται σε χαλάρωση των μανιβελών δεν καλύπτονται από την εγγύηση!
- Ελέγξτε το στύλο της σέλας για ζημιές που προκλήθηκαν από υπερφόρτωση.
- Καθαρίστε τα τμήματα προέκτασης του στύλου της σέλας και το ολίσθησης της σέλας, στη συνέχεια ψεκάστε με σπρέι σιλικόνης και τρίψτε ξανά για να στεγνώσετε.
- Ελέγξτε τους βρόχους του πεντάλ για τυχόν ζημιές.
- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά - επικοινωνήστε μαζί μας γι' αυτό.

Προσοχή: Ξανασφίξτε τους στροφάλους

Οι στροφάλοι πρέπει να επανασφίγγονται μετά τις πρώτες 10 ώρες λειτουργίας.

Εάν οι μοχλοί δεν επανασφίγγονται, μπορεί να προκληθεί ανεπανόρθωτη ζημιά στον άξονα ή στους μοχλούς, οπότε η εγγύηση δεν ισχύει πλέον.

Συντήρηση από εξουσιοδοτημένο ειδικό

Σε περίπτωση προβλημάτων της συσκευής που δεν μπορείτε εύκολα να επιλύσετε μόνοι σας, επικοινωνείτε πάντα με το κέντρο εξυπηρέτησης fitness emotion. Η εξουσιοδοτημένη ομάδα σέρβις θα σας βοηθήσει γρήγορα και με επάρκεια ή θα σας δώσει οδηγίες.

Βαθμονόμηση/συντήρηση

Όλα τα ιατρικά εργομετρικά πεντάλ υπόκεινται σε υποχρέωση MTK (MPBetreibV, §14) και πρέπει να ελέγχονται **κάθε 24 μήνες**.

Επιπλέον, συνιστούμε να **συντηρούνται** και να ελέγχονται τα εξαρτήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους/συνεργάτες **κάθε 12 μήνες**.

Το τμήμα αυτό αναφέρεται στη νομική κατάσταση στη Γερμανία. Παρακαλούμε ελέγξτε την ισχύουσα νομοθεσία για τη λειτουργία των ιατροτεχνολογικών προϊόντων στη χώρα σας.

Οι συσκευές με την κατάληξη "med" είναι σύμφωνες με την οδηγία EU 2017/745 για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Ως εκ τούτου, φέρουν τη σήμανση CE και τον αριθμό του κοινοποιημένου οργανισμού.

Ο διανομέας/χειριστής είναι υπεύθυνος για τη διενέργεια της συντήρησης, του σέρβις και της βαθμονόμησης, καθώς και για ενδεχόμενες επιθεωρήσεις σύμφωνα με τους ισχύοντες περιφερειακούς νόμους και κανονισμούς στον τόπο τοποθέτησης των συσκευών!

Περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε επίσης να λάβετε από τον τοπικό εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

6. Τεχνικά στοιχεία*

Τύπος συσκευής	Διαστάσεις (L/W/H)	Βάρος	μέγιστο βάρος	Ασφαλής φόρτος
motion cycle 900 motion cycle 900 med	119 cm x 65 cm x 145 cm	58 κιλά	150 κιλά- ενισχυμένο: 200 kg	208 κιλά- ενισχυμένο:258 κιλά
motion relax 900 motion relax 900 med	173 cm x 65 cm x 133 cm	80 κιλά	150 κιλά- ενισχυμένο: 200 kg,	230 κιλά- ενισχυμένο: 280 kg,
motion relax 900 ενισχυμένο 250kg motion relax 900 med ενισχυμένη 250kg	173 cm x 78 cm x 133 cm	104 κιλά	ενισχυμένο:250 kg	ενισχυμένη: 354 kg
motion body 900 motion body 900 med	116 cm x 78 cm x 155 cm	98 κιλά	150 κιλά- ενισχυμένο: 200 kg	248 κιλά- ενισχυμένο: 298 kg
motion body 900 WM motion body 900 med WM	63 cm x 56 cm x 155 cm	48 κιλά	150 κιλά- ενισχυμένο: 200 kg	198 κιλά- ενισχυμένο: 248 kg

Σύστημα αντίστασης: Κύριο ανεξάρτητο σύστημα πέδησης

Εύρος επιδόσεων:

κύκλος/χαλάρωση: ανεξαρτήτως ταχύτητας: 15-500 watt (προαιρετικά 7-950 watt)- εξαρτάται από την ταχύτητα: 15-1.000 watt

σώμα: ανεξάρτητο από την ταχύτητα: 15-500 watt (προαιρετικά 7-550 watt)- εξαρτώμενο από την ταχύτητα: 15-750 watt

Ελεύθερος τροχός: διαθέσιμος για ποδήλατο και χαλάρωση

Πληρούνται οι ακόλουθες οδηγίες της ΕΕ:

2001/95/EK Γενική οδηγία για την ασφάλεια των προϊόντων

EU 2017/745 Οδηγία για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα Κλάση IIa (πληρούται μόνο για συσκευές με την κατάληξη med)

2014/30/EE Οδηγία EMC

Χρησιμοποιήθηκαν τα ακόλουθα πρότυπα:

DIN EN ISO 20957-1 Κατηγορία ακρίβειας A, κατηγορία χρήσης S- DIN EN ISO 20957-5,

DIN EN 60601-1:2013; DIN EN 60601-1-2

* Οι τιμές ενδέχεται να διαφέρουν λόγω τροποποιήσεων και επιλογών της συσκευής.

Με την επιφύλαξη τεχνικών και οπτικών αλλαγών και σφαλμάτων εκτύπωσης.

7. Διάθεση αποβλήτων

Με τη σύναψη της σύμβασης αγοράς, συμφωνείται ότι οι επιχειρηματικοί πελάτες είναι υπεύθυνοι για τη διάθεση των της οδηγίας 2012/19/EE για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού οι ίδιοι.

8. Εγγύηση

Αυτό βασίζεται στη νόμιμη εγγύηση.

Η emotion fitness GmbH & Co. KG, ως κατασκευαστής αυτού του προϊόντος, θα αντικαταστήσει δωρεάν τα ελαττωματικά εξαρτήματα για τους επαγγελματίες χρήστες για 24 μήνες από την ημερομηνία τιμολόγησης, εφόσον μπορεί να αποδειχθεί η σωστή χρήση και φροντίδα που καθορίζεται στις παρούσες οδηγίες χρήσης.

Κατά κανόνα, το κόστος εργασίας για ένα σέρβις εγγύησης κατά τη διάρκεια των πρώτων 12 μηνών καλύπτεται από τον αντίστοιχο αντιπρόσωπο στη χώρα σας. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας εάν έχετε οποιοσδήποτε ερωτήσεις.

Η αξίωση εγγύησης λήγει εάν το προϊόν έχει συντηρηθεί ή επισκευαστεί από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Μόλις προκύψει μια αξίωση εγγύησης, θα πρέπει να ενημερώσετε αμέσως την emotion fitness GmbH & Co KG ή τον αντιπρόσωπό σας εγγράφως ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο ιδιοκτήτης της συσκευής πρέπει να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό σειράς της συσκευής, τον χρόνο αγοράς, μια λεπτομερή περιγραφή της βλάβης και την πηγή τροφοδοσίας.

Η emotion fitness GmbH & Co KG ή ο αντιπρόσωπός σας θα οργανώσει ένα σέρβις, αλλά διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει για τον τύπο του σέρβις.

Οι ακόλουθες διαδικασίες είναι πιθανές:

1. Το σέρβις θα πραγματοποιηθεί επιτόπου από εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις.
2. αποστέλλουμε το απαιτούμενο ανταλλακτικό
3. αποστέλλουμε μια συσκευή αντικατάστασης.

Τα ελαττωματικά εξαρτήματα επιστρέφονται σε εμάς από τον πελάτη χωρίς καθυστέρηση και δωρεάν. Σε αντίθετη περίπτωση ο πελάτης θα χρεωθεί για τα παρεχόμενα ανταλλακτικά.

Εάν οι αιτίες βρίσκονται εκτός του πεδίου εφαρμογής της εγγύησης, η emotion fitness GmbH & Co. KG διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει όλα τα έξοδα επισκευής.

Ορισμένα φθαρμένα εξαρτήματα δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Αυτά είναι ιδίως η σέλα, οι στροφάλες και η στερέωση στροφάλων, τα πεντάλ, οι θηλιές πεντάλ, τα υλικά ταπετσαρίας και η λαστιχένια λαβή στο τιμόνι. Τα συστήματα **POLAR** Pulse καλύπτονται από τη νόμιμη εγγύηση.

Οι παρούσες διατάξεις περί εγγύησης δεν επηρεάζουν σε καμία περίπτωση τις γενικές νόμιμες αξιώσεις.

Μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε την τρέχουσα έκδοση των γενικών όρων εξαγωγής μας από την ιστοσελίδα μας www.emotion-fitness.de και να ληφθούν.

CE 0633

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας!

emotion
FITNESS

Κατασκευαστής
emotion fitness GmbH & Co KG
Trippstadter Str. 68
67691 Hochspeyer, Γερμανία
Τηλ +49 (0) 6305-71499-0
Φαξ +49 (0) 6305-71499-111

Διαδίκτυο: www.emotion-fitness.de

E-mail: info@emotion-fitness.de

Κατασκευαστής EUDAMED SRN: DE-MF-000016584

